




みみだより No.58

鳥取聾学校ひまわり分校 聴能担当 R7.7.11

文責：澤田

いよいよ7月24日から長い夏休みに入りますね！夏ならではの伝統行事や
 地域の行事、旅行、勉強、お手伝いなど、夏休みはさまざまな経験を積むチャン
 ス！たくさんの情報を取り入れるためにも、補聴器・人工内耳の日々のお手入れはと
 ても大切です！今一度、確認してみましょう！

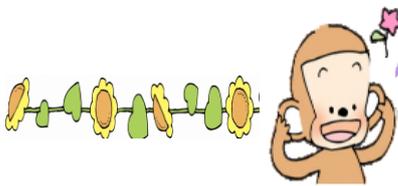

なつやす ちゅう
夏休み中もしっかりと

ほちょうき じんこうないじ かんり
補聴器・人工内耳の管理をしましょう！



《人工内耳のお手入れ》

★寝る前に、サウンドプロセッサ、送信ケーブル、コイルを乾いた
 布でやさしく拭き、乾燥ケースに入れましょう。



★汗や雨などで人工内耳がぬれてしまった時は、送信ケーブル・コイルや充電電池を
 はずさずに、つけたままよく拭いて乾燥させましょう。

→濡れた状態で充電電池等をはずしてしまうと、サウンドプロセッサ内に水分が
 入り、故障の原因になります。

★週1回は、サウンドプロセッサと充電電池の接続端子の汚れを
 アルコールをしみこませた綿棒でふき取りましょう。



★マイクロホンカバーが詰まるときこえが悪くなります。定期的に
 交換しましょう。



(コクレア ホームページより)

《ほちょうき てい 補聴器のお手入れ》

★寝る前に、補聴器本体、フック、イヤモールドなどをティッシュペーパーなどで拭き、電池をはずして乾燥ケースに入れましょう。（電池は入れないで！）

※そのタイミングで電池チェックをされるといいですよ！

★電池が入っていた部分（電池室）に汗がたまっていることがあるので、その時は綿棒でふき取りましょう。

★乾燥ケースのシリカゲルは大丈夫ですか？

→シリカゲルが「ピンク」になっていると乾燥できないので、新しいものと交換しましょう。

★電池室がさびている場合

→アルコールをしみこませた綿棒でふき取りましょう。難しい場合はご相談ください。

★イヤモールドとチューブはフックから外して水洗いすることができます。洗った後はよく拭き、乾燥させてからフックに取り付けましょう。

★水の中に落としたり大雨でぬれてしまった！

→すぐに乾いた布でしっかりとふき取り、乾燥ケースに入れましょう。電池室の水分も綿棒でとることを忘れずに。

★海に落としたりジュースがかかった！

→すぐに水道水（真水）で洗いましょう！その後、乾燥ケースに入れ、補聴器店でみてもらいましょう。

なつやす ちゅう ほちょうき じんこうないじ
夏休み中に補聴器・人工内耳の
いじょう ばあい ほちょうきてん
異常があった場合は、すぐ補聴器店・
びょういん そうだん
病院へ相談をおすすめします。



ワンポイント手話



なつ
夏



まつり
祭

「おやこ手話じてん」より

